

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 00:18

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-okolic-oczu-bezprzewodowe-plastry-zelowe-do-masazu-ems-2w1-max-y1-p-472.html>



Masażer okolic oczu Bezprzewodowe plastry żelowe do masażu EMS 2w1 MAX-Y1

Cena brutto	130,00 zł
Cena netto	105,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MAX-Y1
Kod producenta	Masażer EMS pod oczy plasterki żelowe MAXTECH-Y1
Kod EAN	5907264162343
Producent	MAXTECH Grzegorz Szebesta

Opis produktu

Masażer okolic oczu Bezprzewodowe plastry żelowe do masażu EMS 2w1 MAX-Y1



MAXTECH® prezentuje najnowszy masażer pod oczy, okolic oczu i policzków w formie ultralekkich, nowoczesnych plasterków EMS.






To **kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie**, które możesz **użyć** dosłownie **wszędzie**:

- w domu
- w biurze
- w samochodzie
- przed snem
- przed mekeup-em

Jak używać masażera okolic oczu MAXTECH®-Y1



- 1☐ **Nałóż** główny **moduł** masażera **na żelową nakładkę**, tak aby styki **dokładnie** się połączyły
- 2☐ **Usuń folię** ochronną, aby **odstąpić powierzchnię** samoprzylepną
- 3☐ **Włącz** masażer przytrzymując **przycisk** z boku zasilania **przez 2-3 sekundy**
- 4☐ **Umieść żelową nakładkę na twarzy** - pod oczami lub w okolicach oczu. Następnie **użyj pilota**, aby wybrać **tryb** masażu i **poziom** intensywności **EMS**


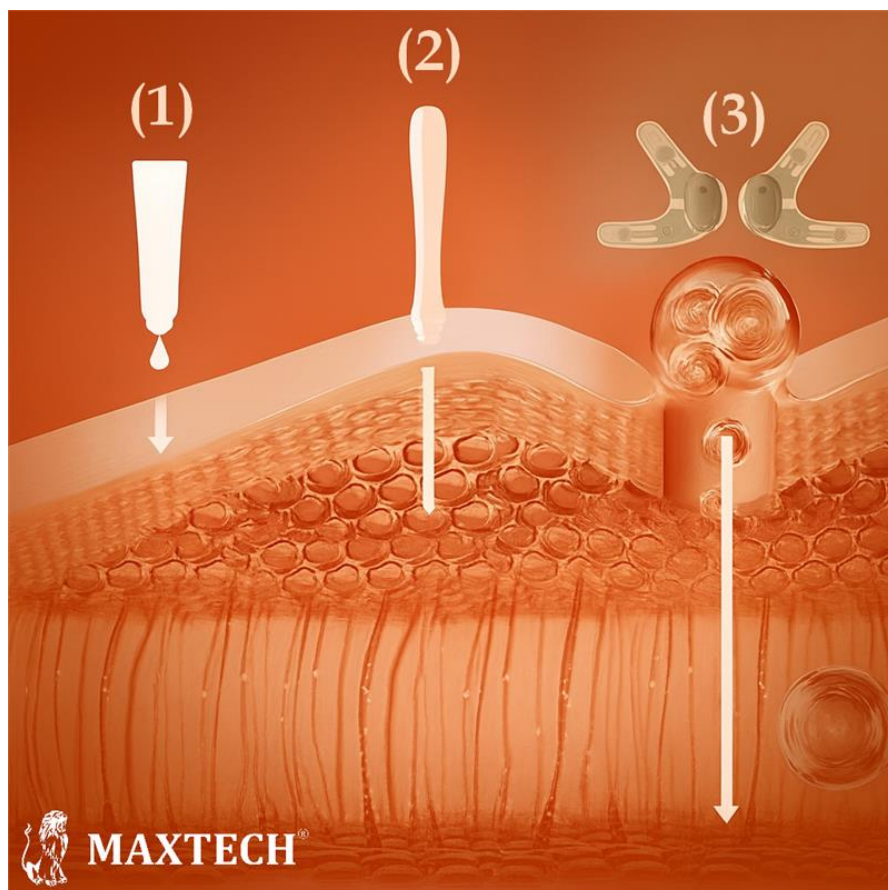



Każda metoda pielęgnacji działa inaczej -
Ale to nasze plastry EMS zapewniają najpełniejszą i najbardziej precyzyjną stymulację

- ☐ **Zwykły krem** działa tylko **na powierzchnię** skóry, dając **ograniczony** efekt.
- ☐ **Tradycyjny masażer** dociera głębiej, ale nadal **nie wykorzystuje w pełni** potencjału pielęgnacji.
- ☐ **Nasz masażer EMS MAXTECH®-Y1** z plastermi **łączy impulsy** i **precyzyjne** działanie, **docierając tam, gdzie zwykłe metody nie sięgają**

Impulsy EMS aktywnie pobudzają skórę dając natychmiastowe uczucie odświeżenia

Technologia naszego masażera EMS MAXTECH®-Y1 kieruje mikrofalę dokładnie tam gdzie Twoja skóra potrzebuje


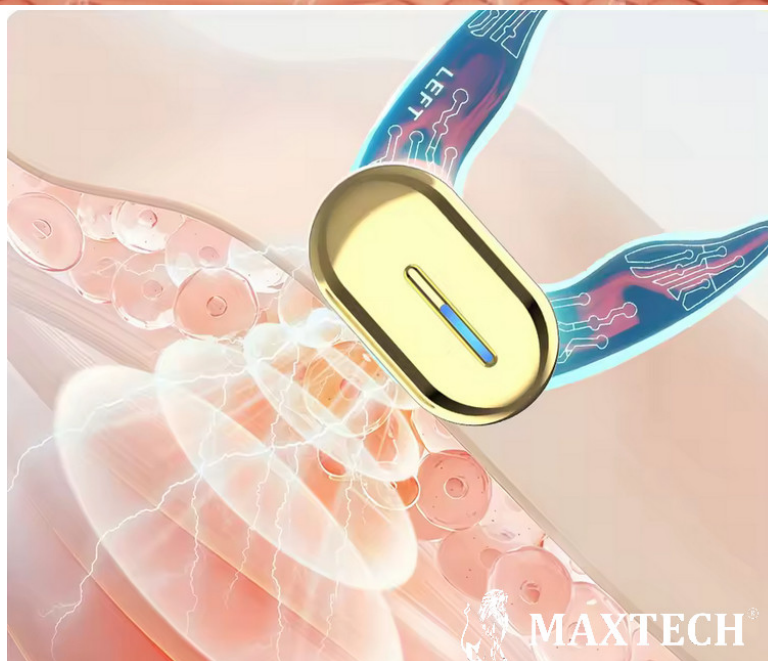
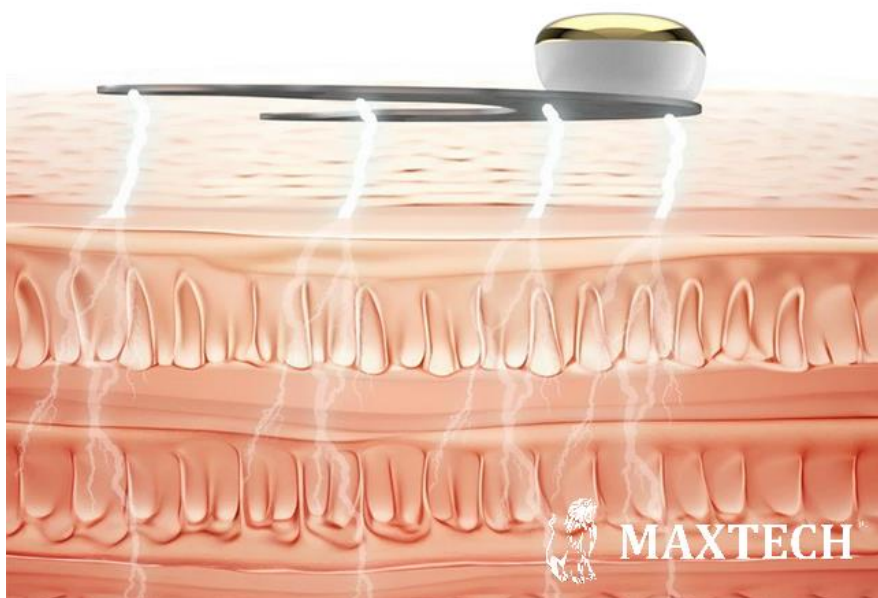


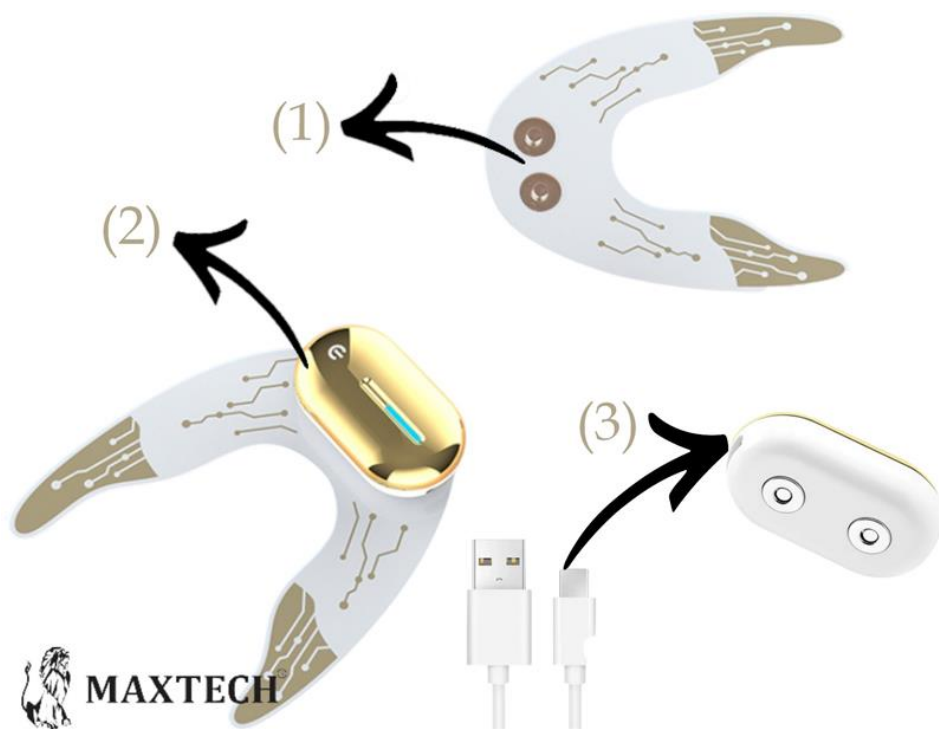

(1) PASTRY EMS

(2) GŁÓWNY STEROWNIK

(3) USB Typ-C - wejście ładowania

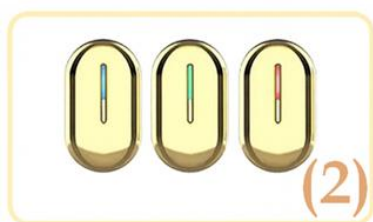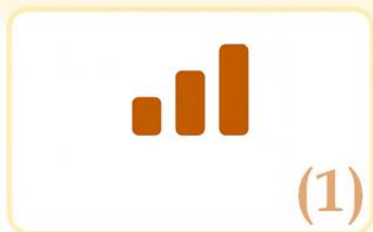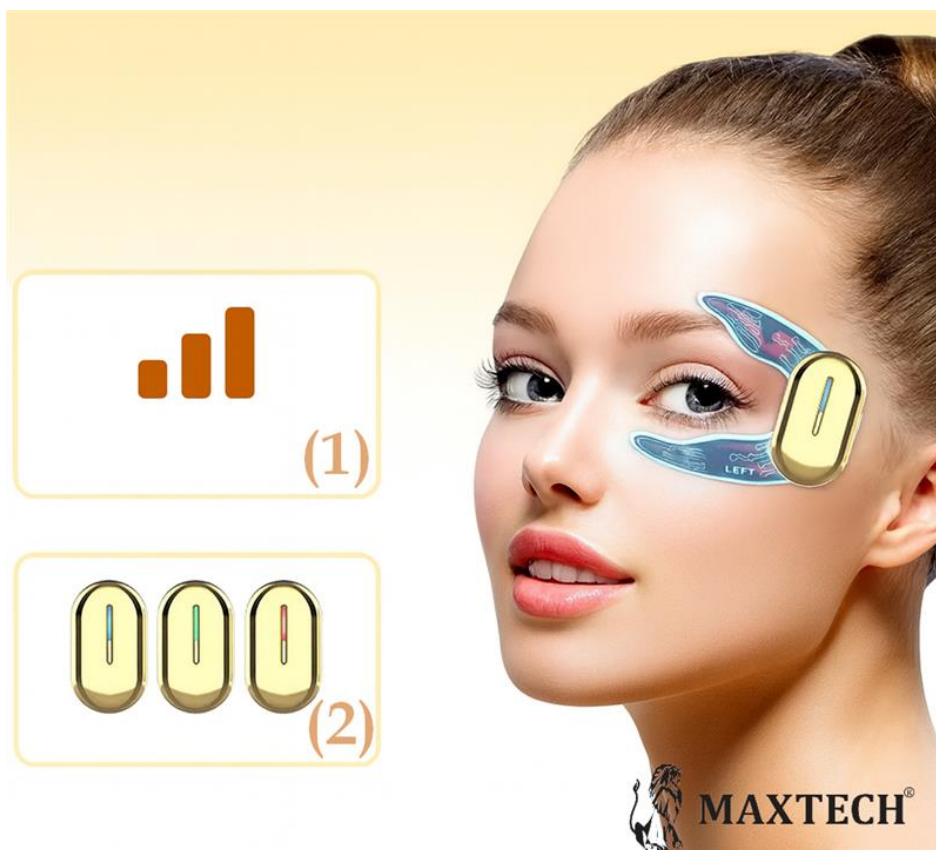

Specyfikacja:

- → **Nazwa produktu:** Masażer pod oczy **EMS MAXTECH®-Y1**
- → **Główny materiał:** ABS + podkładka żelowa
- → **Częstotliwość robocza:** **0-60 Hz**
- → **Napięcie wyjściowe:** **26 V (VPP)**
- → **Prąd wyjściowy:** **EMS 3,1 mA (MAX)**
- → **Napięcie robocze:** **DC3,7V**
- → **Pojemność baterii:** **55 mAh**
- → **Typ baterii:** 401020 Bateria litowo-jonowo-polimerowa
- → **Czas ładowania:** 30 MINUT
- → **Czas pracy:** 2,5-4 godziny
- → **Wskaźnik ładowania:** miga czerwona lampka
- → **Można używać podczas ładowania:** **Nie**

(1) 3 poziomy intensywności

(2) 3 programy automatyczne





W ZESTAWIE

- → **Masażer** oczu **MAXTECH®-Y1**
- → **Plastry** żelowe **pod oczy**
- → **Plastry** żelowe **wokół oczu**
- → **Kabel** zasilający **USB-Typ-C**
- → **Instrukcja** obsługi w j. polskim
- → **Pilot** sterujący
- → Estetyczne opakowanie **doskonały PREZENT**



