

Dane aktualne na dzień: 01-07-2026 01:17

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-okolic-oczu-bezprzewodowe-plastry-zelowe-do-masazu-ems-2w1-max-y1-p-472.html>



## Masażer okolic oczu Bezprzewodowe plastry żelowe do masażu EMS 2w1 MAX-Y1

Cena brutto	<b>130,00 zł</b>
Cena netto	<b>105,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>MAX-Y1</b>
Kod producenta	<b>Masażer EMS pod oczy plasterki żelowe MAXTECH-Y1</b>
Kod EAN	<b>5907264162343</b>
Producent	<b>MAXTECH Grzegorz Szebesta</b>

### Opis produktu

## Masażer okolic oczu Bezprzewodowe plastry żelowe do masażu EMS 2w1 MAX-Y1



**MAXTECH® prezentuje najnowszy masażer pod oczy, okolic oczu i policzków w formie ultralekkich, nowoczesnych plasterków EMS.**






To **kompaktowe, bezprzewodowe urządzenie**, które możesz **użyć** dosłownie **wszędzie**:

- w domu
- w biurze
- w samochodzie
- przed snem
- przed mekeup-em

### Jak używać masażera okolic oczu MAXTECH®-Y1



- 1  Nałóż główny **moduł** masażera **na żelową nakładkę**, tak aby styki **dokładnie** się połączyły
- 2  **Usuń folię** ochronną, aby **odstąpić powierzchnię** samoprzylepną
- 3  **Włącz** masażer przytrzymując **przycisk** z boku zasilania **przez 2-3 sekundy**
- 4  **Umieść żelową nakładkę na twarzy** - pod oczami lub w okolicach oczu. Następnie **użyj pilota**, aby wybrać **tryb** masażu i **poziom** intensywności **EMS**

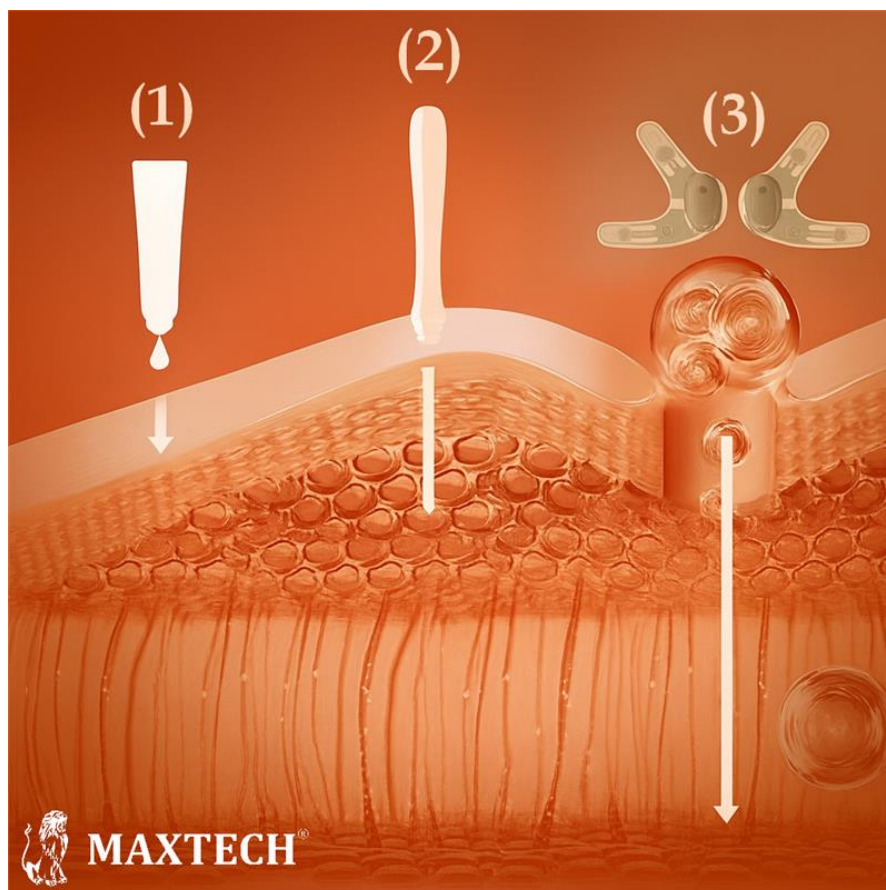



Każda metoda pielęgnacji działa inaczej -  
Ale to nasze plastry EMS zapewniają najpełniejszą i najbardziej precyzyjną stymulację


- Zwykły krem** działa tylko **na powierzchnię** skóry, dając **ograniczony** efekt.
- Tradycyjny masażer** dociera głębiej, ale nadal **nie wykorzystuje w pełni** potencjału pielęgnacji.
- Nasz masażer EMS MAXTECH®-Y1** z plastermi **łączy impulsy i precyzyjne** działanie, **docierając tam, gdzie zwykłe metody nie sięgają**

---

**Impulsy EMS aktywnie pobudzają skórę dając natychmiastowe uczucie odświeżenia**

Technologia naszego masażera EMS MAXTECH®-Y1 kieruje mikrofalę dokładnie tam gdzie Twoja skóra potrzebuje

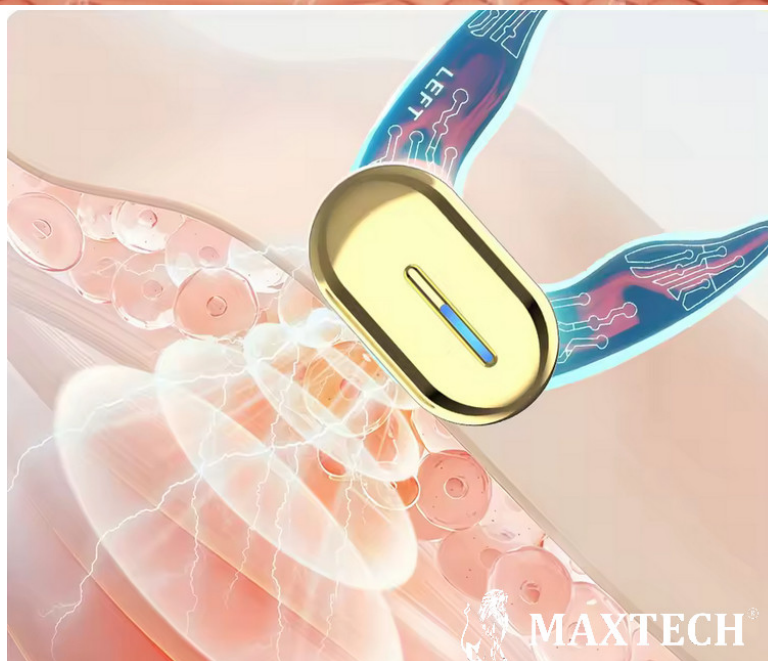
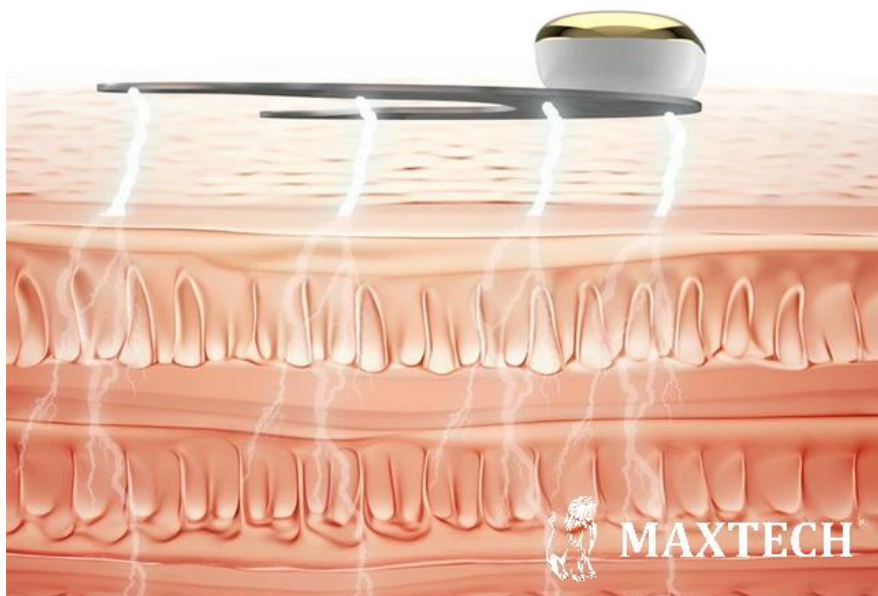


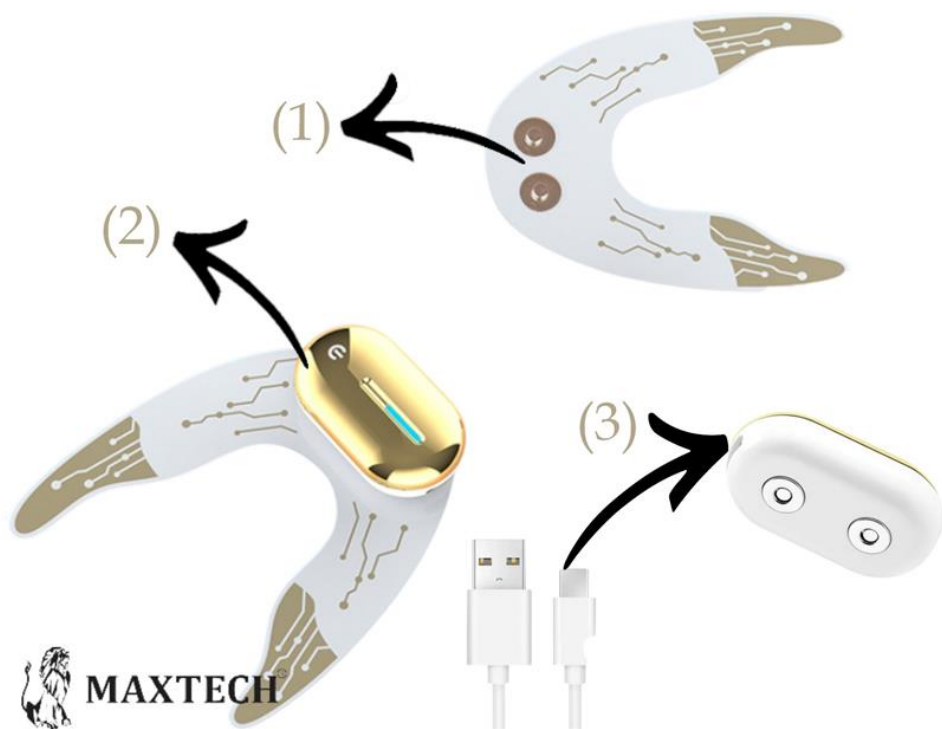

**(1) PASTRY EMS**

**(2) GŁÓWNY STEROWNIK**

**(3) USB Typ-C - wejście ładowania**

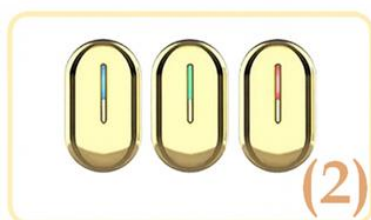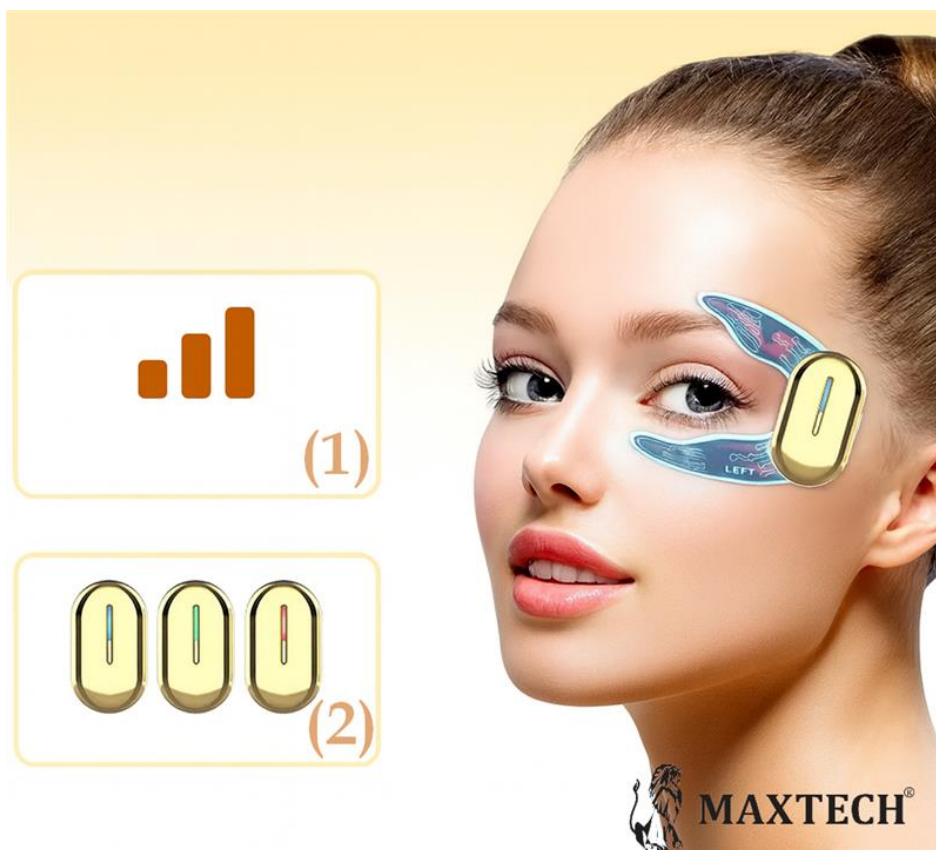

### Specyfikacja:

- → **Nazwa produktu:** Masażer pod oczy **EMS MAXTECH®-Y1**
- → **Główny materiał:** ABS + podkładka żelowa
- → **Częstotliwość robocza:** **0-60 Hz**
- → **Napięcie wyjściowe:** **26 V (VPP)**
- → **Prąd wyjściowy:** **EMS 3,1 mA (MAX)**
- → **Napięcie robocze:** **DC3,7V**
- → **Pojemność baterii:** **55 mAh**
- → **Typ baterii:** 401020 Bateria **litowo-jonowo-polimerowa**
- → **Czas ładowania:** 30 MINUT
- → **Czas pracy:** 2,5-4 godziny
- → **Wskaźnik ładowania:** miga czerwona lampka
- → **Można używać podczas ładowania:** **Nie**

**(1) 3 poziomy intensywności**

**(2) 3 programy automatyczne**





## W ZESTAWIE

- → **Masażer** oczu **MAXTECH®-Y1**
- → **Plastry** żelowe **pod oczy**
- → **Plastry** żelowe **wokół oczu**
- → **Kabel** zasilający **USB-Typ-C**
- → **Instrukcja** obsługi w j. polskim
- → **Pilot** sterujący
- → Estetyczne opakowanie **doskonały PREZENT**



