

Link do produktu: <https://maxgreg.pl/masazer-twarzy-roller-kulowy-4d-ems-lifting-max-1505-p-438.html>



Masażer twarzy roller kulowy 4D EMS lifting MAX-1505

Cena brutto	190,00 zł
Cena netto	154,47 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EMS MAX-1505
Kod producenta	Masażer twarzy EMS kulowy MAXTECH-1505
Kod EAN	5907264160653
Producent	P.H.U.MAX-TECH Grzegorz Szebesta

Opis produktu

**Masażer twarzy
elektryczny Roller do masażu z EMS i wibracją
kulowy lifting**

MAX-1505



ORYGINALNY MASAŻER DO TWARZY I CIAŁA MAXTECH®

EMS + WIBRACJE | 6 poziomów | Wyświetlacz LCD | 360° Roller | USB-C | Polska Instrukcja



Obrót 360°

- **główki** swobodnie **rotują wokół własnej osi**, co pozwala na płynne i naturalne **ruchy masażu wzdłuż linii żuchwy, szyi, policzków, ramion i karku**.

Dzięki temu urządzenie działa dokładnie tam, gdzie potrzeba - **bez szarpania** czy „**skakania**” po skórze.

Główki obrotowe 360° z EMS to serce masażera **MAXTECH®** - odpowiadają za jego skuteczność **liftingującą, relaksującą i pielęgnacyjną**.

To właśnie dzięki nim **urządzenie zapewnia precyzyjne, głębokie działanie**, które wcześniej było dostępne tylko w gabinetach kosmetycznych.

WYŚWIETLACZ LCD

SZYBKE ŁADOWANIE TYP-C



Jak używać masażera MAXTECH® - krok po kroku:




1. Nałóż swój ulubiony kosmetyk na skórę

Przed rozpoczęciem masażu **zaleca się użycie kremu, serum, ampułki**. Delikatnie **rozprowadź produkt** ręcznie, **aby zwiększyć przewodzenie** impulsów EMS i poprawić efekt masażu.

2. Włącz urządzenie

Przytrzymaj przycisk zasilania (na dole panelu) **przez 2-3 sekundy**. **Urządzenie uruchomi się** automatycznie w trybie podstawowym - **EMS** oraz **WIBRACJE** ustawione na **najniższym poziomie (1/6)**

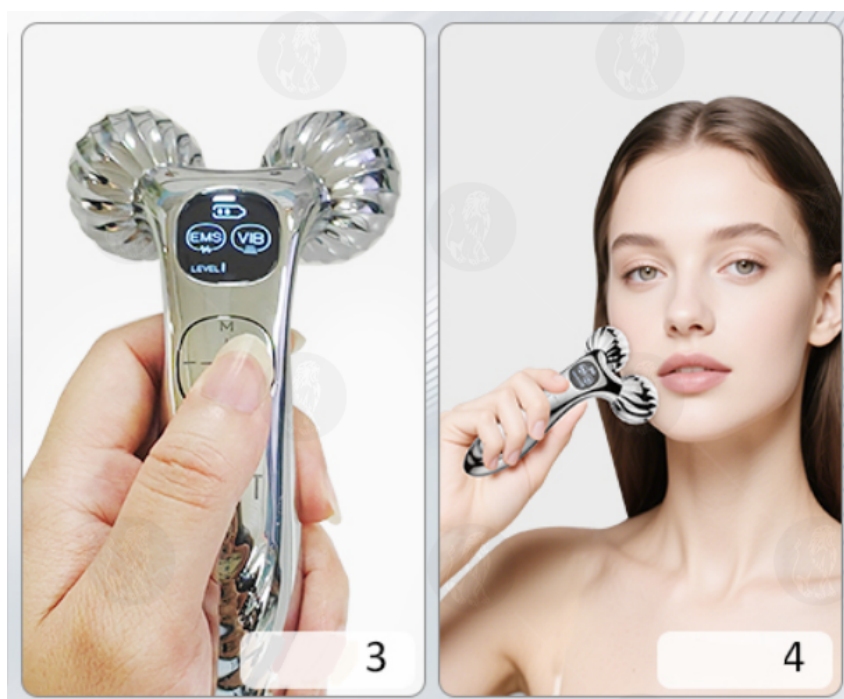

3. Dostosuj intensywność działania

Korzystaj z przycisków „+” i „-”, aby dopasować moc działania do swoich potrzeb - **osobno dla EMS** i **osobno dla**

wibracji.

Wybierz preferowany tryb pracy

Naciśnij przycisk „M”, aby przełączać się pomiędzy trybami:

EMS + WIBRACJE (oba jednocześnie),

Tylko **EMS,**

Tylko **WIBRACJE.**

4. Rozpocznij masaż

Przesuwaj głowice masażera powoli i równomiernie **po skórze twarzy, szyi, ramion**, a także w innych partiach ciała. **Głowice 360° dopasowują się** do konturów i **zapewniają** płynne, przyjemne ruchy.

Jak używać :





□ **Efekt masażu 3D + lifting twarzy V-line**



Obrotowe głowice wykonują ruch przypominający profesjonalny masaż liftingujący.

Pomagają one w modelowaniu **owalu twarzy**, **podnoszeniu** opadających **policzków** oraz **poprawie konturu** w kształcie litery V - efekt widoczny już po kilku dniach stosowania.

□ **Bezpieczeństwo i komfort użytkowania**

Obudowa głowic została **wykonana z karbowanego, chłodnego metalu** który **jest higieniczny i łatwy do czyszczenia**.

Delikatne **wypustki w strukturze głowic** potęgują efekt masażu, jednocześnie **nie powodując podrażnień**.




IDEALNY DLA:

- ✓ **Kobiet i mężczyzn**, którzy chcą poprawić wygląd i kondycję skóry
- ✓ **Osób zmęczonych**, z napięciem mięśni twarzy, szyi i karku
- ✓ Wszystkich, **którzy chcą efektywnej pielęgnacji** w domowym zaciszu
- ✓ **Jako prezent dla bliskiej osoby** - zapakowany estetycznie

Technologia głowic 360° - głęboka penetracja i regeneracja skóry

Zaawansowane, podwójne głowice rotacyjne 360°

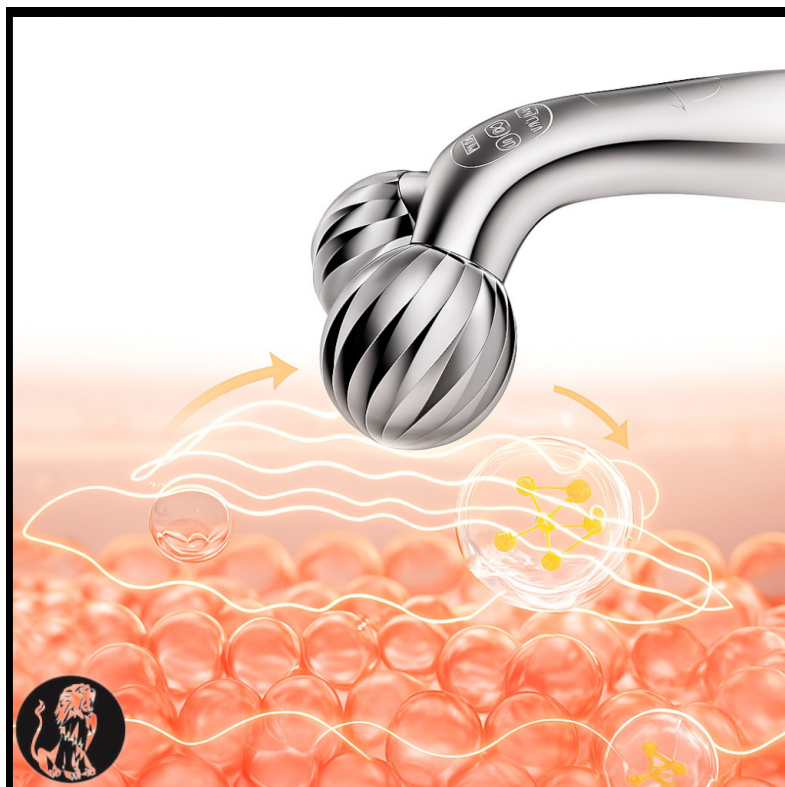

w masażerze MAXTECH® to nie tylko lifting zewnętrzny **to coś więcej**

- **przenikają** przez naskórek,
- **pobudzają** mikrokrążenie i limfę,
- **przyspieszają** wchłanianie składników aktywnych z kosmetyków,
- **aktywują** procesy regeneracji kolagenu i elastyny.

Dzięki temu:

1. **zmniejszają** się oznaki starzenia,
2. **wygładzają** drobne **zmarszczki**,
3. **poprawia** się **koloryt** i **napięcie** skóry,
4. cera **zyskuje** naturalny **blask** i **świeżość**.



Dane techniczne:

Nazwa: Masażer twarzy **MAXTECH® 1505**

Pojemność baterii: 3,7 V **400 mAh**

Kolor: **Srebrny**

Ustawienie intensywności EMS: **6 poziomów**

Ustawienie intensywności wibracji: **6 poziomów**

Częstotliwość wibracji: **8000 obr / min**

Wymiary: **160x83x48 mm**

Napięcie wejściowe: **DC 5 V / 1 A.**

Masa: **141 g**

Czas ładowania: **3 godziny**

Czas pracy: **2 godziny**



Zestaw zawiera:

- ☐- **Masażer** twarzy roller **EMS MAXTECH®**
- ☐- **Kabel ładujący:** Typ C
- ☐- **Instrukcję** obsługi PL
- ☐- **Oryginalne** estetyczne opakowanie